

HURTIGREFERANSE

VIKTIG

- Denne testen kan brukes innen de ti første dagene etter at det er oppstått symptomer på COVID-19.
- Denne testen er godkjent for hjemmebruk av personer fra 12 år. Neseprøver fra personer under 12 år eller over 70 år bør tas av eller under tilsyn av voksne.
- Testen vil ta ca. 5 minutter å sette opp, og testresultatene må leses etter 15 minutter.
- Det er viktig at du følger instruksjonene omhyggelig for å oppnå riktig resultat.
- Testenheten og bufferløsningen må være ved romtemperatur (15–30°C) før du starter testen.
- Vask eller sprit hendene før og etter testen.
- Treff nødvendige sikkerhetstiltak ved testing av andre personer (f.eks. munnbind, hansker).

Kontakt kundeservice hvis du har spørsmål om bruk av testen eller lesning av resultatene.
Internett: www.clinitest.siemens-healthineers.com

KOMME I GANG


Innhold i pakken

- Sterile vattpinner (5)
- Testenheter (5)
- Ekstraksjonsrør med buffer og spisser (5)
- Bruksanvisning (1)
- Hurtigreferanse (1)


NØDVENDIG UTSTYR SOM IKKE MEDFØLGER

Klokke, tidtaker eller stoppeklokke og plastpose for avfall.

TESTPROSEDYRE

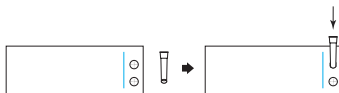

Trinn 1.
Sett røret inn i arbeidsstasjonen. Fjern lokket fra toppen av røret.

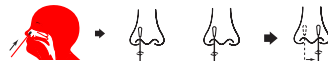


Trinn 4.
Rull vattpinnen minst 5 ganger mot insiden av neseboret. Sikre god kontakt mellom vattpinnen og insiden av neseboret.

Trinn 5.
Fjern vattpinnen, og før den inn i høyre nesebor. Gjenta trinn 3 og 4.




Trinn 10.
Fjern vattpinnen, og kast i en plastpose.

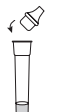


Trinn 11.
Skyv den medfølgende spissen i settet inn i røret, og kontroller at den passer godt.

Trinn 15.
Les resultatene. Det er tre mulige typer resultater.

Positivt testresultat

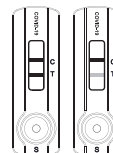

Hvis testenheten ser ut som et av vinduene med positivt resultat til venstre, har du en aktuell COVID-19-infeksjon. Kontakt lege eller lokale helsemyndigheter, og kontroller at du følger lokale retningslinjer for selvisolasjon. Det kan være nødvendig å teste på nytt med andre testmetoder som en PCR-test.

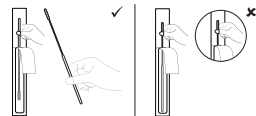

Trinn 2.
Åpne vattpinnepakningen der det er angitt. Trekk ut vattpinnen ved å gripe plastenden. Ikke ta på den absorberende spissen på vattpinnen.



Trinn 6.
Fjern vattpinnen fra neseboret, og før den inn i røret på arbeidsstasjonen.



Trinn 7.
Bland godt ved å rulle vattpinnen minst 6 ganger mens du presser hodet på vattpinnen mot bunnen og siden av røret.

Klem her 4 dråper løsning




Trinn 13.
Tilsett 4 dråper løsning i prøvebrønnen ved å klemme røret forsiktig.



Trinn 12.
Fjern testenheten fra posen, og legg den på en flat, ren overflate.

Negativt testresultat

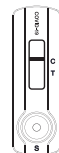

Hvis testenheten ser ut som vinduet med negativt resultat til venstre, kunne det ikke påvises noen COVID-19-infeksjon. I et antall tilfelle gjentar du testen etter 1–2 dager siden viruset ikke kan påvises nøyaktig i alle faser av en infeksjon. Tross negativt testresultat må du fortsatt følge alle gjeldende regler for kontakt med andre og vernetiltak.



Trinn 3.
Før den absorberende spissen på vattpinnen forsiktig inn i venstre nesebor. Kontroller at hele spissen på vattpinnen er inne i neseboret (2–4 cm dypt). Ikke før vattpinnen lengre inn etter at du har kjent motstand.



Trinn 8.
Start tidtaker. La vattpinnen stå i røret i 1 minutt.




Trinn 9.
Klem røret flere ganger fra utsiden. Røret å løse opp så mye løsning fra vattpinnen som mulig.



Trinn 14.
Start tidtakeren, og les resultatene etter 15 minutter. Det er viktig å lese resultatene etter 15 minutter.

Ugyldig testresultat

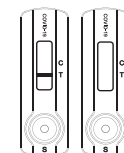

Hvis testresultatet ser annerledes ut, dvs. ingen linje eller bare én linje vises ved T, er resultatet ugyldig. Dette kan skyldes testutførelsen. Følg testprosedyren og gjenta test. Hvis ugyldige testresultater vedvarer, må lege eller et COVID-testsentral kontaktes.



SYMBOLFORKLARING

	Se brukerveiledningen		Tester per sett		Autorisert representant
	Kun til in vitro-diagnostisk bruk		Brukes innen		Ikke til gjenbruk
	Oppbevares ved 2–30°C		Lotnummer		Katalognr.
			Produsent		



Healgen Scientific Limited Liability Company
Adresse: 3818 Fuqua Street, Houston, TX 77047, USA.
Tlf: +1 713-733-8088 Faks: +1 713-733-8848
Nettsted: www.healgen.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Adresse: Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Tyskland



GCCOV-502a-HS
(11556329)



Revisjonsdato: 2021-05-20
822214-01
Rev. A