

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE

- Ten test można wykonywać w ciągu pierwszych dziesięciu dni od wystąpienia objawów choroby COVID-19.
- Ten test jest zatwierdzony do użytku w warunkach domowych przez osoby, które ukończyły 12. rok życia. Wymazaj z nozdrzy osobę poniżej 12. roku życia i powyżej 70. roku życia powinny być pobierane przez osoby dorosłe lub pod ich nadzorem.
- Przygotowanie testu zajmuje około 5 minut, a wynik testu należy odczytać po 15 minutach.
- Aby uzyskać prawidłowy wynik, istotne jest ściśle przestrzeganie instrukcji.
- Przed rozpoczęciem testu należy doprowadzić wyrób do testowania i roztwór buforowy do temperatury pokojowej (15–30°C).
- Przed wykonaniem testu oraz po wykonaniu testu należy umyć lub odkażać ręce.
- W przypadku wykonywania testu innej osobie należy nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (np. maseczkę, rękawiczki).

W przypadku pytań dotyczących wykonywania testu lub odczytywania wyników należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
Strona internetowa: www.clinitest.siemens-healthineers.com


PIERWSZE KROKI

Zawartość zestawu

- Sterylny wymazówkę (5)
- Kasetki testowe (5)
- Probiówki do izolacji z buforem i końcówkami (5)
- Instrukcja użytkownika (1)
- Skrócona instrukcja obsługi (1)

MATERIAŁY WYMAGANE, ALE NIEDOSTARCZANE

Zegar, minutnik lub stoper oraz worek z tworzywa sztucznego na odpady.

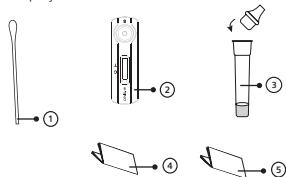

WYKAZ SYMBOLI

	Zapoznać się z instrukcją użytkownika		Liczba testów w zestawie		Autoryzowany przedstawiciel
	Wyłączenie do stosowania w diagnostyce in vitro		Data przydatności do użycia		Nie używać ponownie
	Przechowywać w temperaturze 2–30°C		Numer serii		Numer katalogowy
					Producent



Krok 1.

Włożyć probówkę do płytki roboczej. Zdjąć zatyczkę z probówki.



Krok 4.

Obrócić wymazówkę co najmniej 5 razy, dociskając końcówkę wymazówki do ścianki nozdrza. Należy dobrze docisnąć końcówkę wymazówki do ścianki nozdrza.

Krok 5.

Wyjąć wymazówkę i włożyć ją do prawego nozdrza. Powtórzyć kroki 3 i 4.



Krok 10.

Wyjąć wymazówkę i wyrzucić ją do worka z tworzywa sztucznego.


Krok 11.

Wcisnąć końcówkę zakraplacza dołączoną do zestawu do probówki i upewnić się, że jest ona dobrze dopasowana.


Krok 15.

Odczytać wyniki. Istnieją trzy możliwe typy wyników.

Pozytywny wynik testu

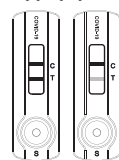

Jeśli na kasetce testowej widoczne jest jedno z przedstawionych po lewej okienko wskazujących na wynik pozytywny, obecne jest aktywne zakażenie wirusem wywołującym chorobę COVID-19. Należy skontaktować się z lekarzem lub lokalną placówką medyczną i przestrzegać lokalnych zasad dotyczących samoizolacji. Może być konieczne powtórzenie testu innymi metodami, na przykład metodą PCR.

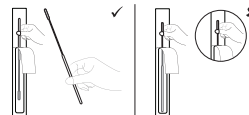

Krok 2.

Otworzyć opakowanie z wymazówką w oznaczonym miejscu. Chwycić wymazówkę za koniec z tworzywa sztucznego i wyjąć ją z opakowania. Nie dotykać chłonnej końcówki wymazówki.



Krok 6.

Wyjąć wymazówkę z nozdrza i włożyć ją do przygotowanej probówki w płytce roboczej.



Krok 12.

Wyjąć kasetkę testową z woreczka i położyć go na płaskiej, czystej powierzchni.



Krok 7.

W celu dokładnego wymieszania obrócić wymazówkę co najmniej 6 razy, dociskając czubek wymazówki do dna i ścianek probówki.

Wcisnąć 4 krople roztworu



Krok 13.

Wkropić 4 krople roztworu do dolka na próbce kasetki testowej, delikatnie ściskając probówkę.



Krok 3.

Ostrożnie włożyć chłonną końcówkę wymazówki do lewego nozdrza. Upewnić się, że cała końcówka wymazówki znajduje się wewnątrz nozdrza (głębokość 2–4 cm). W przypadku wycucia oporu nie należy wsuwać wymazówki głębiej.



Krok 8.


Uruchomić minutnik. Pozostawić wymazówkę w probówce na co najmniej 1 minutę.



Krok 14.


Uruchomić minutnik i odczytać wyniki po upływie 15 minut. Istotne jest, aby odczytać wyniki dokładnie po upływie 15 minut.

Negatywny wynik testu

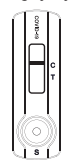

Jeśli na kasetce testowej widoczne jest przedstawione po lewej okienko wskazujące na wynik negatywny, nie wykryto zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19. W przypadku podejrzenia zakażenia należy powtórzyć test po 1–2 dniach, gdyż wirus nie jest wykrywalny z wysoką dokładnością we wszystkich fazach zakażenia. Pomimo negatywnego wyniku testu nadal należy przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad dotyczących kontaktu z innymi osobami oraz stosować środki ochronne.

Nieważny wynik testu

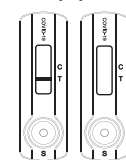

Jeśli wynik testu wygląda inaczej, to znaczy brak jest widocznych linii lub obecna jest tylko jedna linia w obszarze I, wynik jest nieważny. Wynik taki może być spowodowany błędem podczas wykonania testu. W takim przypadku należy powtórzyć test. W przypadku otrzymania kolejnego nieważnego wyniku należy skontaktować się z lekarzem lub centrum badań w kierunku COVID.



Healgen Scientific Limited Liability Company
Adres: 3818 Fuqua Street, Houston, TX 77047, USA.
Tel.: +1 713-733-8088 Faks: +1 713-733-8848
Strona internetowa: www.healgen.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Adres: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Niemcy



GCCOV-502a-HS
(11556329)



Data wydania wersji: 2021-05-20
822214-01
Wer. A