


Instrucțiuni de testare pentru părinți și copii



1. Spălați-vă pe mâini.
2. Dezambalați caseta de testare.
3. Deschideți ambalajul bețișorului de testare.



4. Deschideți tubul cu lichid.
Plasați recipientul pe o suprafață plană. Atenție să nu se verse lichidul.

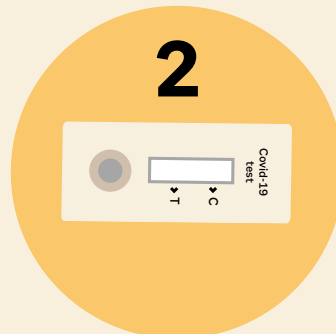


5. Efectuați testul.
La autotestare, adulții pot recolta exudat orofaringian și nazofaringian. Se începe cu recoltarea exudatului orofaringian. Deschideți gura și introduceți bețișorul în zona posterioară a orofaringelui, în zona amigdalelor. Se recoltează de pe fiecare perete posterior de 4 ori. După aceea introduceți bețișorul cu grijă în nară până simțiți că întâmpină rezistență, dar fără a introduce mai mult decât vârful bețișorului. Rotiți bețișorul ușor de 5 ori în interiorul nării. Repetați procedura în cealaltă nară. Testarea copiilor se va face numai din partea anterioară a nării.

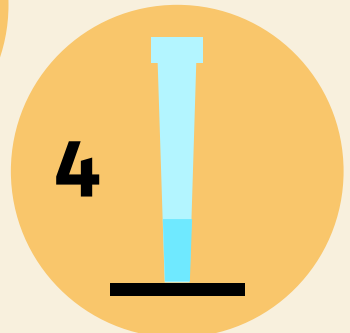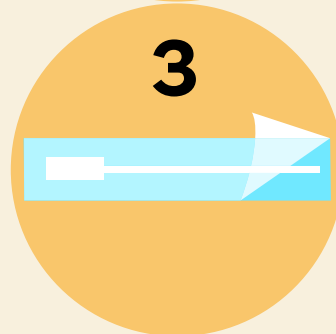



6. Introduceți bețișorul în recipientul cu lichid.

Rotiți bețișorul de 6 ori apăsând totodată recipientul. Lăsați bețișorul în recipient timp de 1 minut. Scoateți bețișorul presând între recipientul între degete. Puneți dopul pipetă la recipient.


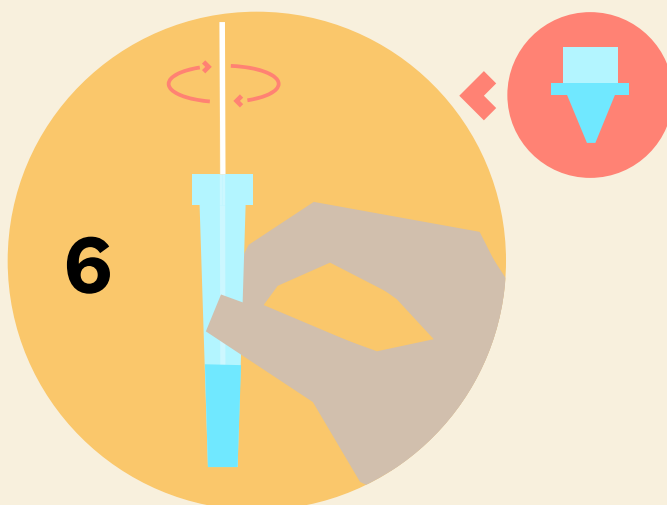


7. Transferați 4 picături din recipient în pe godeul de probe al casetei de testare.

Rezultatul va fi gata după 15 minute (cronometrați).

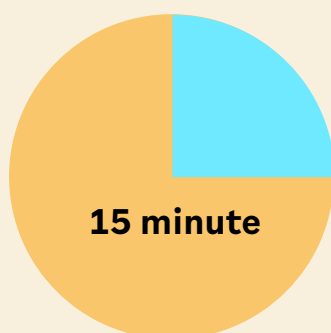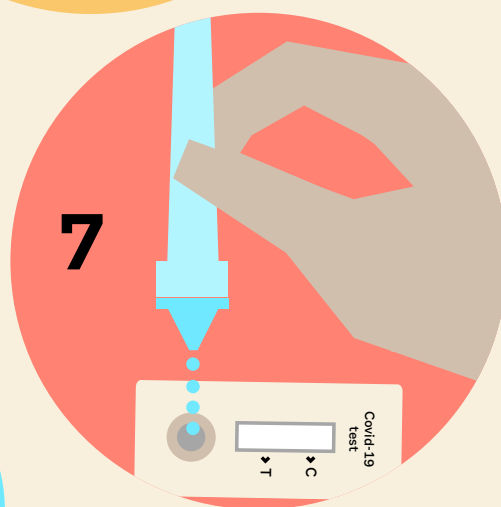

Test pozitiv

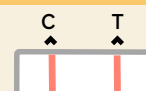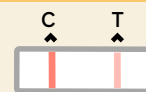

Test negativ

