


Как сделать тест себе и ребенку

1. Вымойте руки.




2. Откройте тестовую кассету.

Положите ее на твердую поверхность.

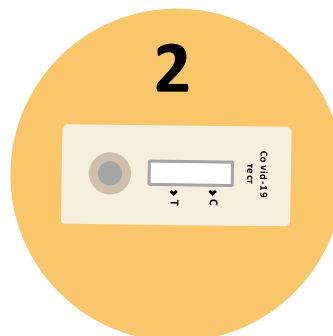



3. Откройте упаковку с палочками для взятия проб.

Откройте флакон с жидкостью. Поставьте его на твердую поверхность. Следите за тем, чтобы не расплескать жидкость.

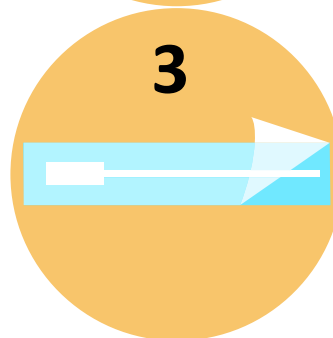

5. Возьмите пробу для тестирования.


При выполнении самостоятельного тестирования взятие пробы у взрослого можно произвести и из глотки, и из носа. Сначала возьмите пробу из глотки. Откройте рот и проведите палочкой с тампоном глубоко в ротовой полости, возле миндалин. Проведите по 4 раза с каждой стороны. Затем введите кончик палочки с тампоном в ноздрю, пока не ощутите сопротивление, но не глубже, чем на длину тампона. Касаясь тампоном слизистой носа, поверните палочку 5 раз. Повторите эти действия во второй ноздре. Взятие пробы для самотестирования у ребенка производится только из носа, неглубоким вводом палочки в ноздри.

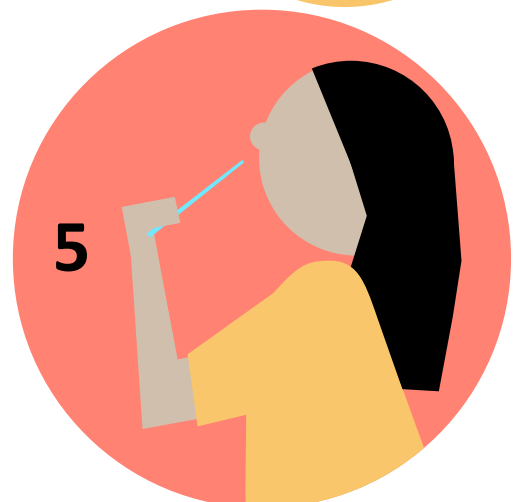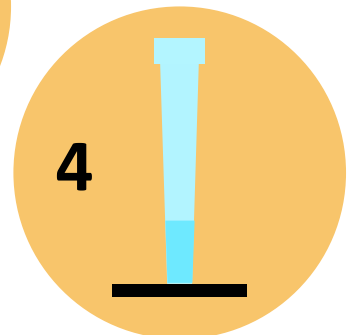

6. Опустите палочку с тампоном во флакон с жидкостью.

Выполните 6 круговых движений, надавливая тампоном на дно флакона. Оставьте палочку во флаконе на 1 минуту.

Извлеките палочку, отжимая ее надавливанием на стенки флакона. Наденьте наконечник на флакон.

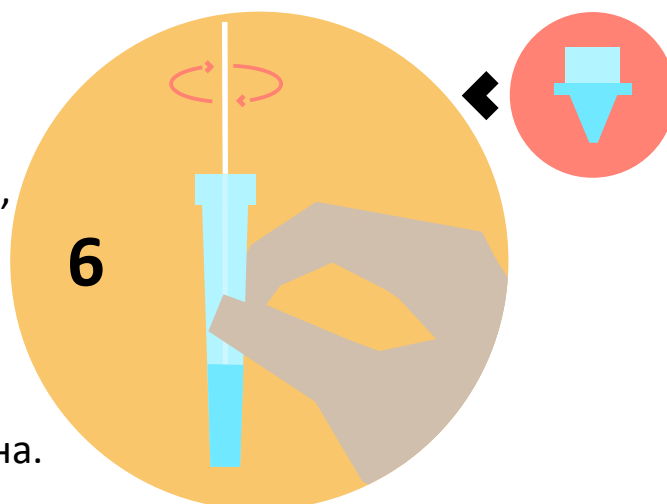

7. Закапайте 4 капли из флакона в лунку тестовой кассеты.

Ответ будет готов через 15 минут (засеките время).

