

Cómo realizarse el test a usted mismo y a su hijo

1. Lávese las manos.

2. Abra el casete de test.

Colóquelo sobre una superficie rígida.




3. Abra el envase del hisopo.

4. Abra el tubo de extracción.

Colóquelo sobre una superficie rígida. Procure no derramar el líquido.


5. Tome el hisopo.

Coja el test. En adultos, se podrán tomar muestras tanto de la faringe/garganta como de la nariz a la hora de hacerse el autotest. Primero, tome una muestra de la faringe/garganta. Introduzca en ella el hisopo hasta llegar a las amígdalas. Frote con el hisopo cada lado 4 veces. Después, inserte suavemente la punta del hisopo en la nariz hasta que sienta resistencia, pero no continúe cuando toda la parte delantera del hisopo esté dentro de la nariz. Gire el hisopo en el interior de la fosa nasal 5 veces. Repita el mismo procedimiento en la otra fosa nasal. En niños, el autotest solo se realizará en la parte frontal de la nariz.

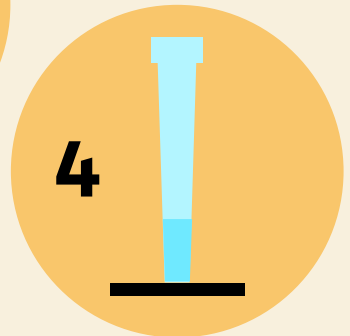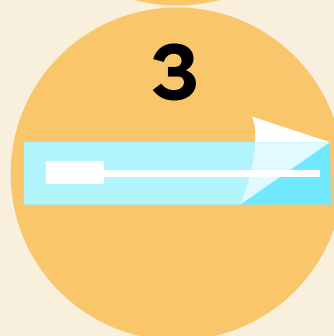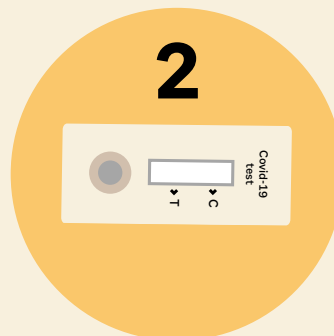

6. Introduzca el hisopo dentro del tubo de extracción

Gírelo 6 veces mientras el tubo. Deje el presiona hisopo dentro del tubo durante un minuto. Saque el hisopo mientras aprieta el tubo. Ponga el tapón del tubo.

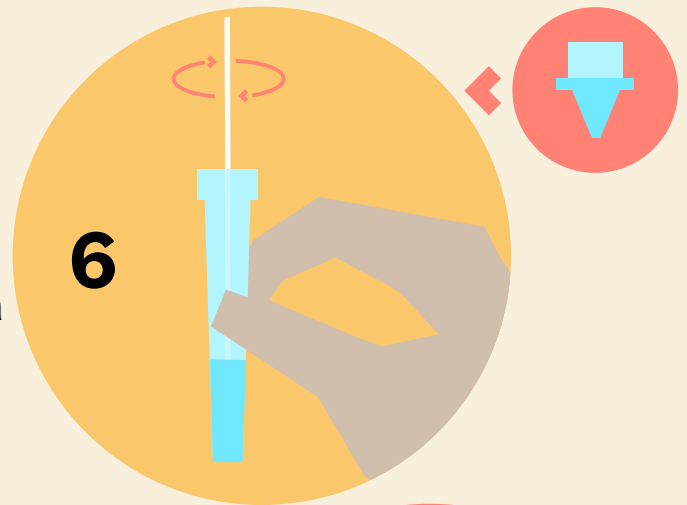

7. Deposite 4 gotas de la muestra en el pocillo de muestras del casete.

El resultado estará listo en 15 minutos (controle el tiempo).

